



Your Endo Specialist™

One Shape®

Technical characteristics



Sanavis Group

La lima única en rotación continua



Your Endo Specialist™

Características técnicas



- Diseño del instrumento innovador y original instrumental = sin equivalencia en el mercado.
- Principio
N bordes de corte en la punta
N-1 bordes de corte en la parte superior del archivo
zona de transición




Sanavis Group

La lima única en rotación continua

= Instrumento con sección variable



Your Endo Specialist™

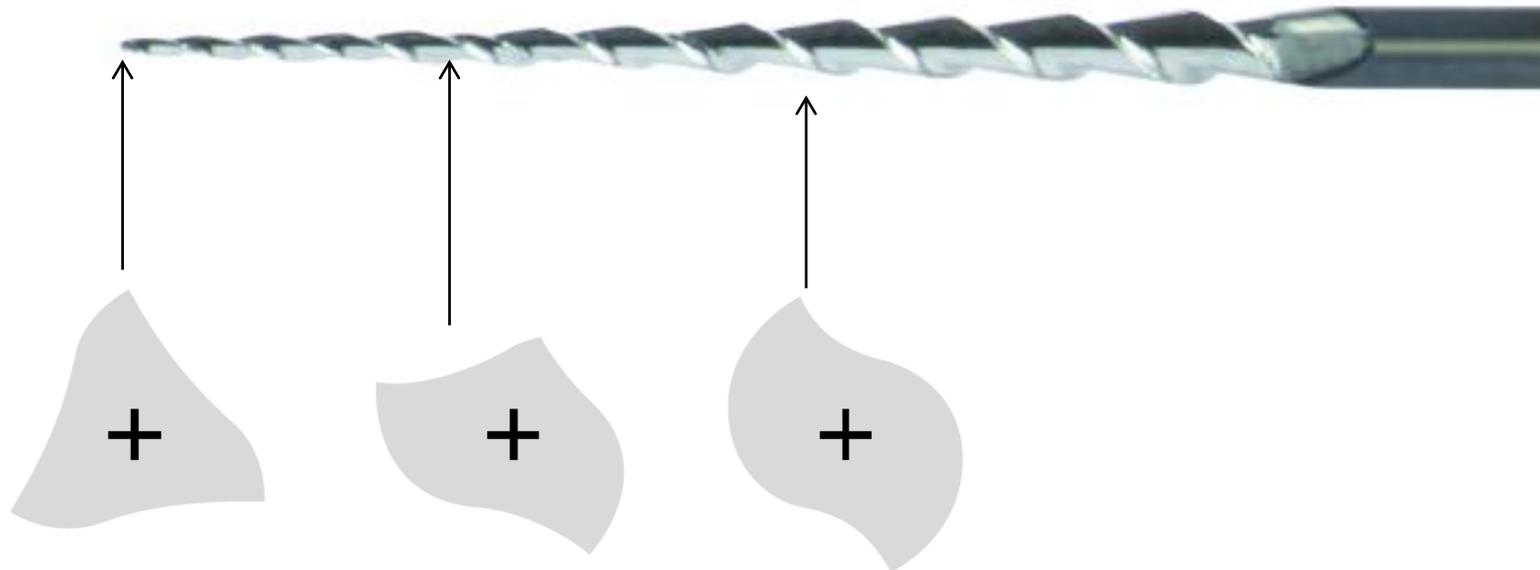

→ MICRO-MEGA® innovación: el instrumento presenta distintas secciones transversales a lo largo de la hoja.



Sanavis Group

La lima única en rotación continua



Your Endo Specialist™

Instrumento de sección transversal variable La geometría One Shape

- * Zona con 3 fillos de corte idénticos : 0 - 2mm
 - * Zona de transición: 2 to 9.5 mm
 - * Zona con 2 fillos de corte idénticos : 9.5 to 17 mm
-
- * Parte mecanizada: 17 mm
 - * Parte cortante: entre 15 mm / 16 mm



Sanavis Group

La lima única en rotación continua



Your Endo Specialist™



Cross section at 1,5 mm from the tip

10µm H




Sanavis Group

La lima única en rotación continua



Your Endo Specialist™

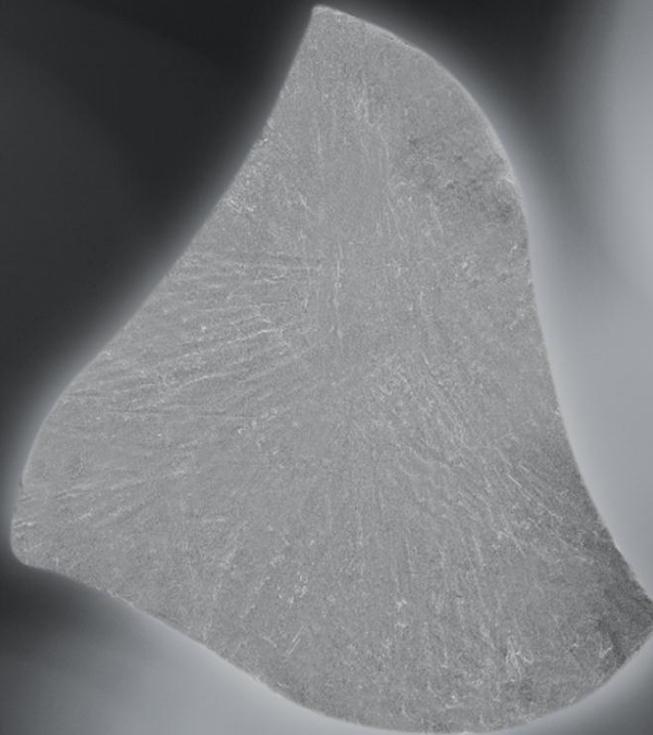

Cross section at 3 mm from the tip

10µm H




Sanavis Group

La lima única en rotación continua



Your Endo Specialist™

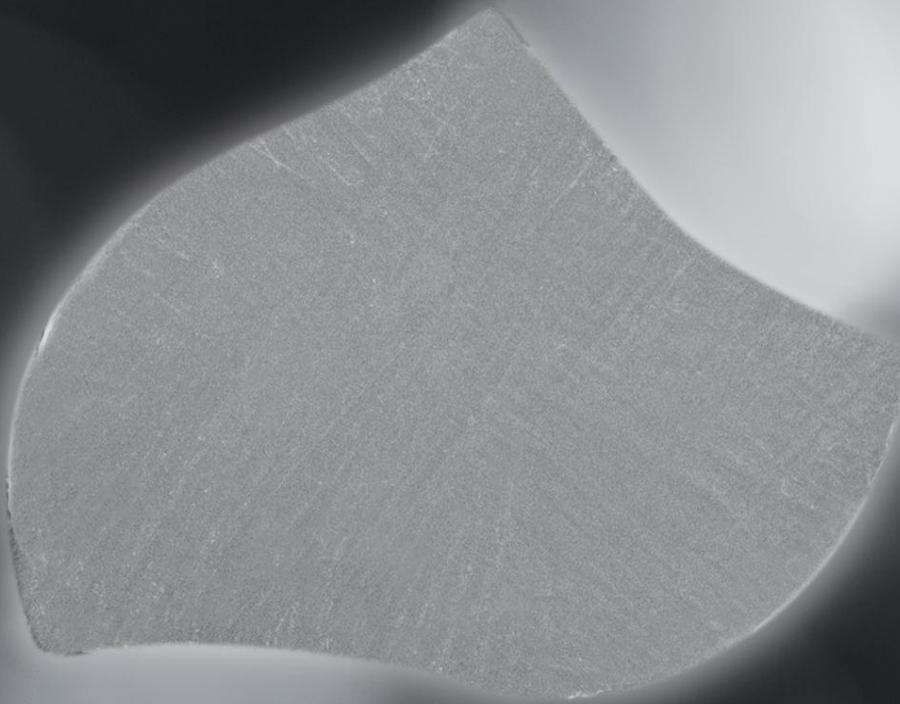

Cross section at 6 mm from the tip

10µm H




Sanavis Group

La lima única en rotación continua



Your Endo Specialist™

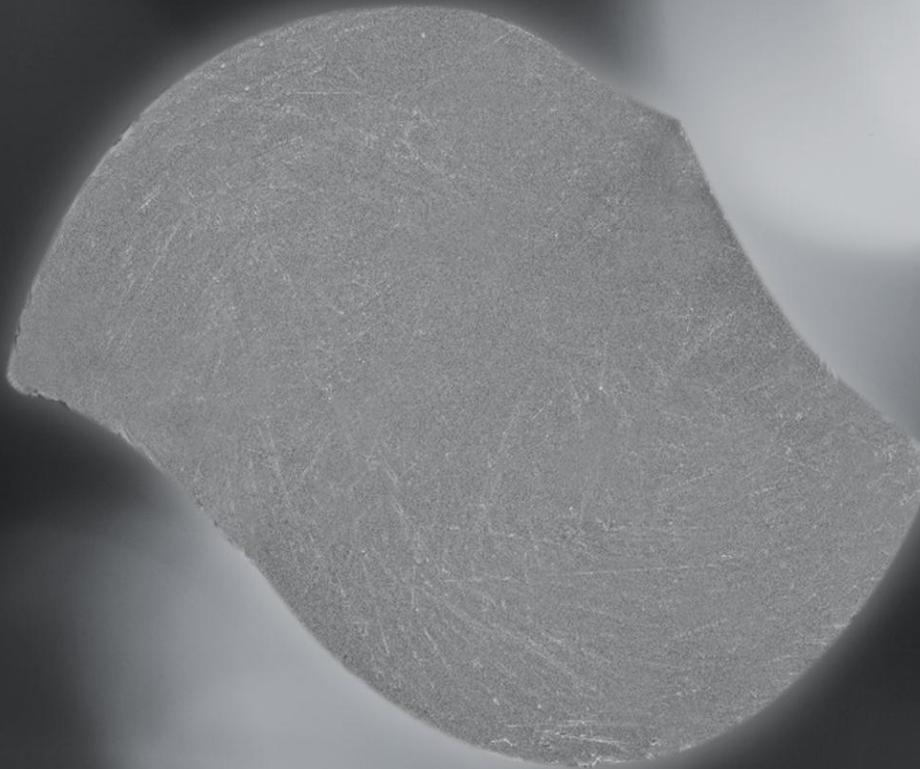

Cross section at 9 mm from the tip

30µm 




Sanavis Group

La lima única en rotación continua



Your Endo Specialist™

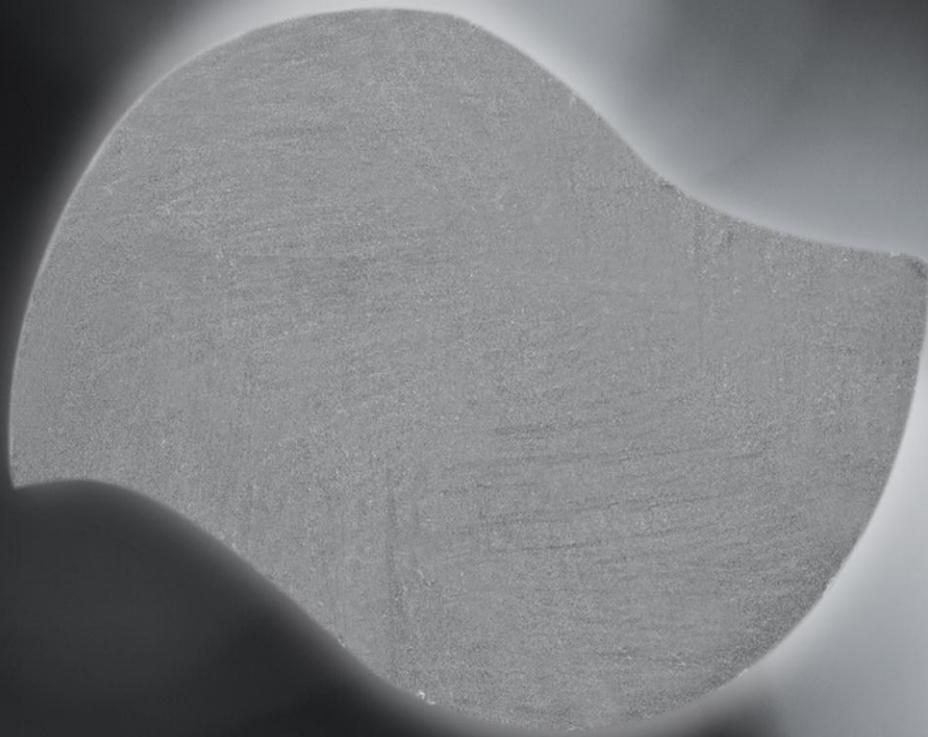

Cross section at 12 mm from the tip

20µm H



Sanavis Group

La lima única en rotación continua




Your Endo Specialist™

Ventajas de este diseño innovador



- Un instrumento único con 3 zonas de corte distintas = Una lima puede hacer el trabajo de 3 limas!
- La guía en el conducto por los tres ángulos de corte (HERO Shaper® o Revo-S™) y la flexibilidad de One Shape® asegura un perfecto respeto a la trayectoria original del canal y curvatura.

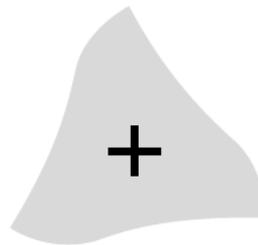

Sanavis Group

La lima única en rotación continua




Your Endo Specialist™

Ventajas de este diseño innovador



- La zona de 2 ángulos de corte en la zona coronal nos ofrece un corte óptimo y una óptima evacuación de residuos
- El paso variable de One Shape® reduce el efecto atornillado

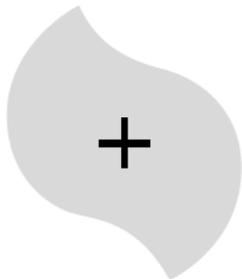

Sanavis Group



Your Endo Specialist™

Simple y eficaz dinámica de instrumentos

- . Efectúe la permeabilización con limas de cateterismo MMC
- . Use un movimiento leve de picoteo hasta la longitud de trabajo
- . Si encuentra resistencia al paso de la lima en conductos estrechos o muy curvos, retire y limpie el instrumento, irrigue el conducto y permeabilice con una lima (MMC 10) antes de continuar con el tratamiento del conducto radicular.

**K File
(MMC)
N° 10**



**K File
(MMC)
N° 15**



**One
Shape®**



WL: Working length

Speed of rotation: 400 rpm



Dinámica de trabajo



Your Endo Specialist™

→ Si no es posible alcanzar el ápice con una lima manual de 15 (MMC 15) puede utilizar las G-Files™ (G1 + G2) para establecer de forma rápida y fácil la vía de conducto hasta el ápice.



Sanavis Group